

# Incontinencia Urinaria (I.U.)



## 1

### INTRODUCCIÓN A LA I.U.

- Definición y Características
- Prevalencia
- Calidad de vida de los pacientes con I.U.
- Tipos de I.U.

## 2

### IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

- Objetivos específicos
- Conocer el estado del paciente
- Cuantificación de las pérdidas y grado de la I.U.
- El estado de la piel: el mayor indicativo de la calidad asistencial
- Casos de dermatitis asociada a la mala gestión de la I.U. (o lesiones por humedad)
- Elección del tipo de absorbente

## 3

### ABSORBENTES REEMBOLSADOS

- Tipos de absorbentes
- Composición de un absorbente
- ProSkin
- ¿Qué es la Skin Health Alliance?
- Productos reembolsados TENA & ORLYS
- Valoración y colocación de absorbentes
- 10 pasos para la correcta colocación y aprovechamiento de un absorbente

## 4

### ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

- Soluciones TENA para la incontinencia
- TENA Discreet y TENA Silhouette
- Incontinencia masculina
- TENA Men y TENA Men Pants
- TENA Gama Higiene

# INTRODUCCIÓN A LA I.U.

## Definición y Características

Según la International Continence Society (2002), es una **pérdida involuntaria de orina**, a través de la uretra, objetivamente demostrable, ocasionando **problemas sociales e higiénicos** para el individuo.



La I.U. tiene **amplia repercusión** para el individuo, para quienes le rodean y para la sociedad en general



La mayoría de los incontinentes tienden a **ocultar su problema** a la sociedad, a su familia e incluso a ellos mismos.



Quienes la sufren con frecuencia se sienten **molestos, avergonzados y solos**

1

# INTRODUCCIÓN A LA I.U.

## Prevalencia

La incontinencia  
afecta a  
alrededor de



**400\*** millones de  
personas en  
el mundo  
6,5 millones de España<sup>†</sup>


**1 de cada 4 hombres\*\***

mayores de 40 años tiene  
pérdidas de orina



**1 de cada 3 mujeres\*\***

mayores de 35 años tiene  
pérdidas de orina

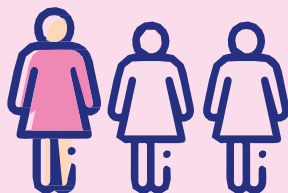

La prevalencia de la IU se incrementa  
**progresivamente con la edad**,  
observándose un pico de frecuencia entre  
50-60 años, alrededor de la menopausia

Prevalencia de I.U. en España  
en mayores de 65 años



Atención  
Comunitaria

**15%**

más frecuente en mujeres



Atención  
Domiciliaria

**30%**



Residencias o  
Instituciones

**70%**

\* GFI, niza 2019. † AEU, 2020. \*\* SCA Study 2013

1

# INTRODUCCIÓN A LA I.U.

## Sin embargo...

Busca en Internet:

“las 10 enfermedades más prevalentes en mayores de 65 años”

... la incontinencia no parece...

# 1

## INTRODUCCIÓN A LA I.U.

# La IU tiene un impacto significativo para la persona con incontinencia y sus cuidadores

**Calidad de vida:** la IU es la quinta causa que más reduce la calidad de vida de las personas y está entre las 10 enfermedades crónicas más prevalentes en la población mayor.

*“La IU no mata, pero te mata la calidad de vida”- Dr. Esteban*

**Sociales:** esta patología limita claramente las relaciones del paciente y afecta gravemente a su autoestima e independencia.


**Formativos:** al ser considerada una patología secundaria la inversión en formación es baja.

1

# INTRODUCCIÓN A LA I.U.

## Calidad de vida de los pacientes

### Impacto en la calidad de vida y otros diagnósticos

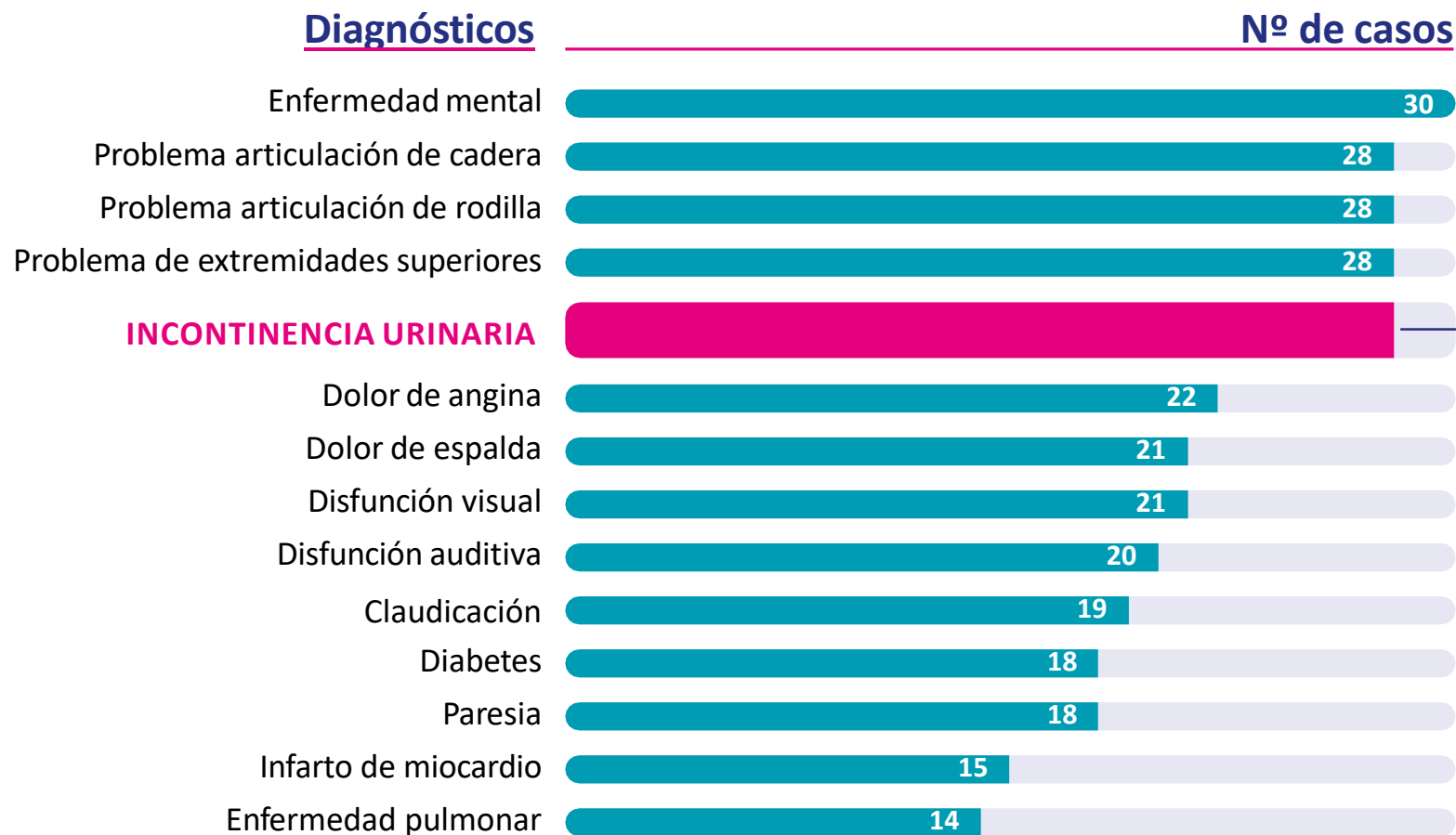

Total NHP muestra (n=565): 13. Sanos (n=116): 6. Enfermos (n=449): 15

# 5ª

posición en cuanto  
al impacto en la vida  
de los pacientes

Entre el 50% y el 70% de  
los pacientes no consultan  
a su médico y enfermera\*

GRAN TABÚ

\* AEU, 2020.

# Calidad de vida de los pacientes

La **incontinencia urinaria** es una problemática con un **alto nivel de impacto** y una vivencia personal muy negativa

## Sentimientos asociados

- Dependencia
- Obsesión
- Deterioro
- Negación
- Vergüenza
- Limitación



## Ámbitos de incidencia

- Laborales
- Sexuales
- Psicológicos
- Emocionales
- Físicos
- Sociales

1

## INTRODUCCIÓN A LA I.U.

# Tipos de Incontinencia Urinaria



### Incontinencia de esfuerzo

Súbita e involuntaria pérdida de orina, al realizar un incremento de la **presión intra-abdominal, provocada por los esfuerzos.**

Más frecuente en MUJERES



### Incontinencia de urgencia

Deseo súbito y repentino de orinar, sin que sea posible alcanzar el cuarto de baño a tiempo.

Más frecuente en PERSONAS MAYORES



### Incontinencia funcional

Incapacidad de alcanzar el **servicio**, bien sea por causas físicas, mentales, falta de motivación, falta de cuidadores, barreras arquitectónicas, etc.



### Incontinencia por rebosamiento u obstrucción

Pérdida de pequeñas cantidades de orina sin **poder vaciar la vejiga totalmente** (hipertrofia benigna de próstata).

Más frecuente en HOMBRES

# IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

## Conocer el estado del paciente

Una valoración de los principales condicionantes del paciente permitirá **elegir el absorbente que mejor se adapte a sus necesidades**



### NIVEL DE DEPENDENCIA

- Dependencia completa
- Dependencia parcial
- Independencia



### GRADO DE I.U

- Ligera
- Moderada
- Grave



### ESTADO DE LA PIEL

- Piel sana
- Piel sensible
- Piel rota o dañada



### COMPLEXIÓN FÍSICA

- Pequeña
- Mediana
- Grande

**Además se debe de valorar también:**



Medicación  
prescrita



Ingesta de  
líquidos



Estado  
cognitivo



Destreza  
manual







Entorno familiar  
e instalaciones

# IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

## Cuantificación de las pérdidas y grado de la I.U.



 GRADO DE I.U.	NIVEL DE INCONTINENCIA	Cantidad de pérdida	Frecuencia
	 LEVE	Unas gotas o un poco más, o una cantidad considerable	1 o varias veces al mes
	 MODERADA	Unas gotas o un poco más	Varias veces en semana o a diario y/o de noche
	 GRAVE	Una cantidad considerable	

# El estado de la piel: el mayor indicativo de la calidad asistencial



## ESTADO DE LA PIEL

La **Piel** es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, tiene funciones de protección, regulación de la temperatura, hidratación... El **cuidado de la piel** es fundamental para evitar su deterioro.

- **Dermatitis asociada a la mala gestión de la I.U. (o lesiones por humedad):** describe la respuesta reactiva de la piel a la exposición crónica de orina y material fecal que puede ser observada como inflamación y/o eritema.



Para cuidar la piel de la persona incontinente es imprescindible elegir un **ABSORBENTE TRANSPIRABLE EN SU TOTALIDAD**, que mantenga seca y ventilada la piel preservando su microclima natural.

## Casos de dermatitis asociada a la mala gestión de la I.U. (o lesiones por humedad)



”La Transpirabilidad de un absorbente como factor de prevención de la DAI”

# IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

## Elección del tipo de absorbente



### IMPORTANCIA DE INFORMAR

al paciente o al cuidador de todos los tipos de absorbentes y consensuar la elección con ellos.



### INVALIDEZ FUNCIONAL DEL PACIENTE:

El grado de movilidad facilita el uso de técnicas de vaciado de la vejiga programado y contribuye a un menor uso de pañales, por lo menos durante el día.

La recomendación de un tipo de absorbente u otro dependerá de:



### NECESIDAD DE USO DE ABSORBENTES

para todo el día o sólo durante la noche.



**PRESENCIA DE CUIDADOR CAPACITADO Y COLABORADOR,** tanto en la ayuda con la movilidad del paciente como con el cambio de absorbentes.

3

# ABSORBENTES

## Tipos de absorbentes

Supernoche  
> 1200 ml

Noche  
> 900 ml

Día  
> 600 ml

ABSORCIÓN

### FINANCIADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL



Sistema anatómico  
o de dos piezas



Anatómicos con cinturón



Pants




Anatómicos con elásticos

Se puede colocar el absorbente por sí solo sin necesidad de ayuda

Con ayuda

### NO FINANCIADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL

Compresa  
masculina  
para la  
incontinencia

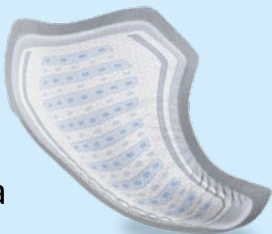

Compresa  
femenina para la  
incontinencia



Pants  
(género  
y unisex)



Clasificación basado en la Norma UNE -EN ISO 15621:2017 y la Guía de Atención a Personas con Incontinencia AEU ISBN: 978-84-09-17847-6 Enero 2020.

4

## ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

# Soluciones TENA para la incontinencia



**MUJER**

**Discreet, Lady y  
Lights Sensitive**  
(Compresas)

**Silhouette**  
(Ropa interior  
desechable)



**HOMBRE**

**Men**  
(Compresas y  
boxer lavables)

**Men Pants**  
(Ropa interior  
desechable)



**UNISEX**

**Pants**  
(Ropa interior  
desechable)

**ProSkin**  
Gama Higiene

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Discreet y TENA Lady

- TENA Discreet Protege Slip
- TENA Discreet Compresas
- TENA Discreet Compresas +
- TENA Discreet Noche



Los productos TENA Discreet son líderes mundiales en **INCONTINENCIA URINARIA**



# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Discreet: Composición



Superficie sin tejer

Capa de Adquisición


Núcleo pequeño (pulpa y SAP)

Núcleo grande (pulpa y SAP)

Espuma elástica

Superficie exterior transpirable\*

Papel desechable

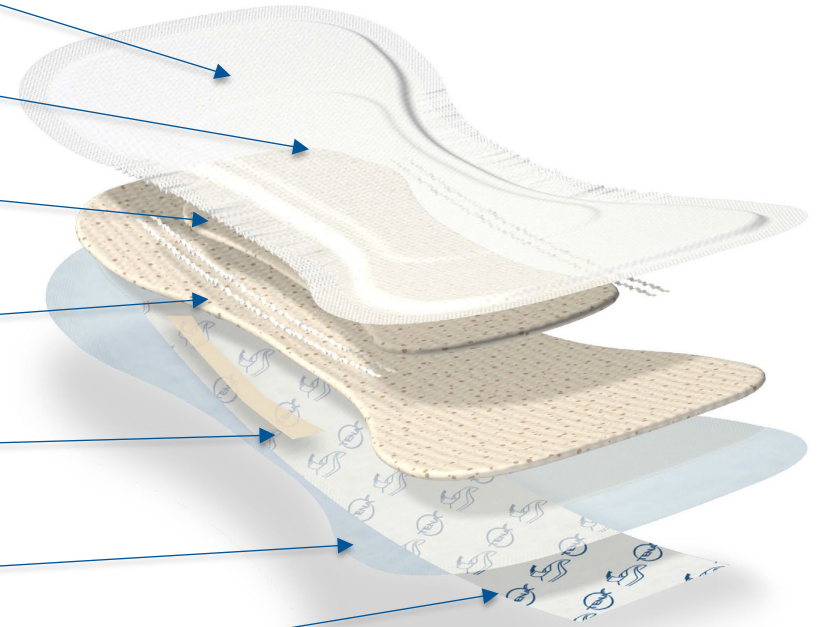

- \*Excepto TENA Lady Super

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)


## TENA Discreet: Núcleo Absorbente

- El exclusivo núcleo superabsorbente de las compresas TENA Discreet (**Dry fast Core**) ofrece una efectiva protección ante las fugas.
- El superabsorbente (SAP) retiene la orina, manteniéndola bloqueada y lejos de la piel, proporcionando así una agradable sensación de **sequedad, confort y bienestar durante todo el día**.

### Odour Control™

El exclusivo superabsorbente (SAP) de las compresas TENA Discreet está desarrollado a partir de exclusivas microperlas, que inhiben el desarrollo de las bacterias responsables del mal olor

Test detección del olor (The Swedish Institute for Food and Biotechnology - SIK)

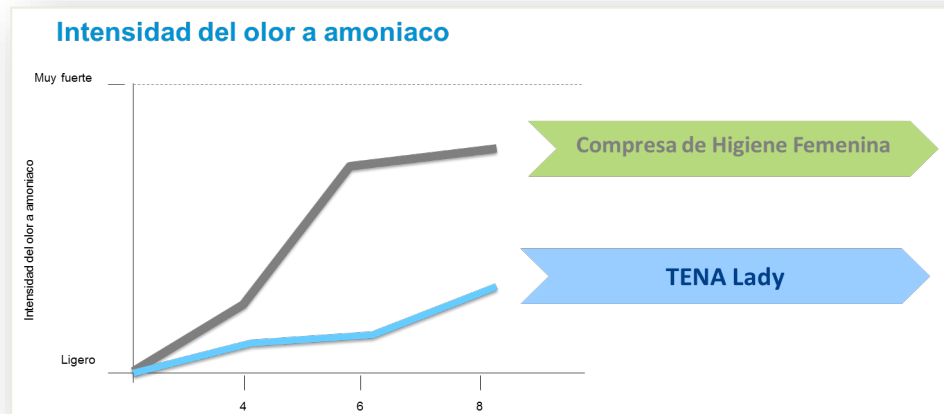


# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## **TENA Discreet:** Triple protección (3X Protection)

TENA proporciona protección allí donde más se necesita:


- **SEGURA:** Protección rápida y discreta
- **ODOUR CONTROL:** Micro-perlas activas que neutralizan el desarrollo del mal olor
- **SECA:** Gracias a su Zona de absorción

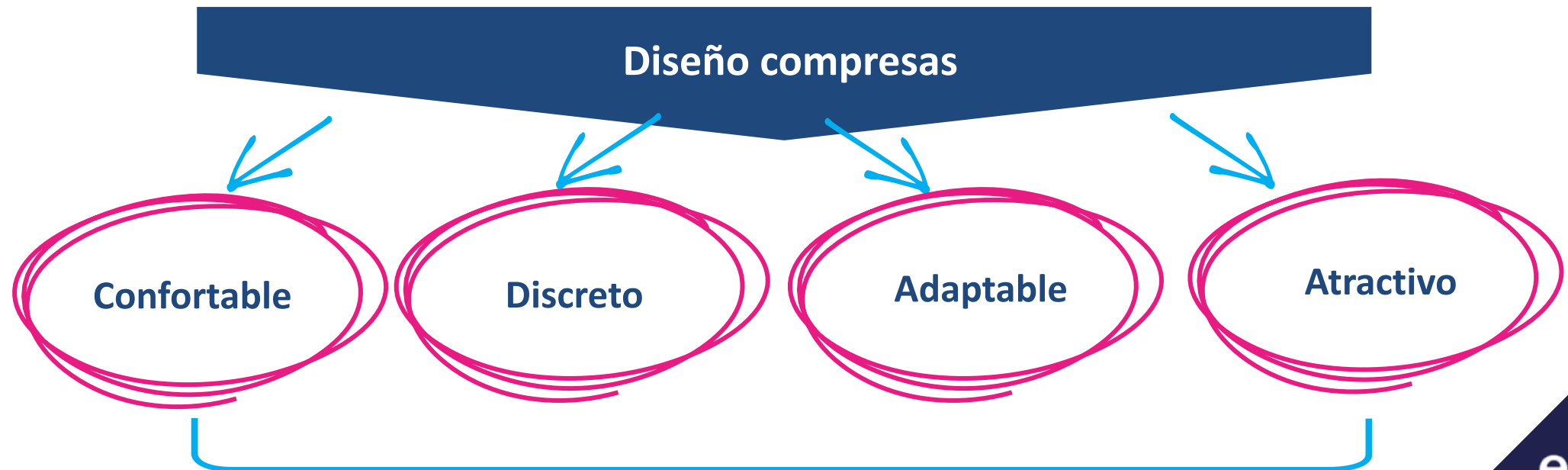

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Discreet

- La gama más completa del mercado
- Se adapta a cada tipo de consumidora

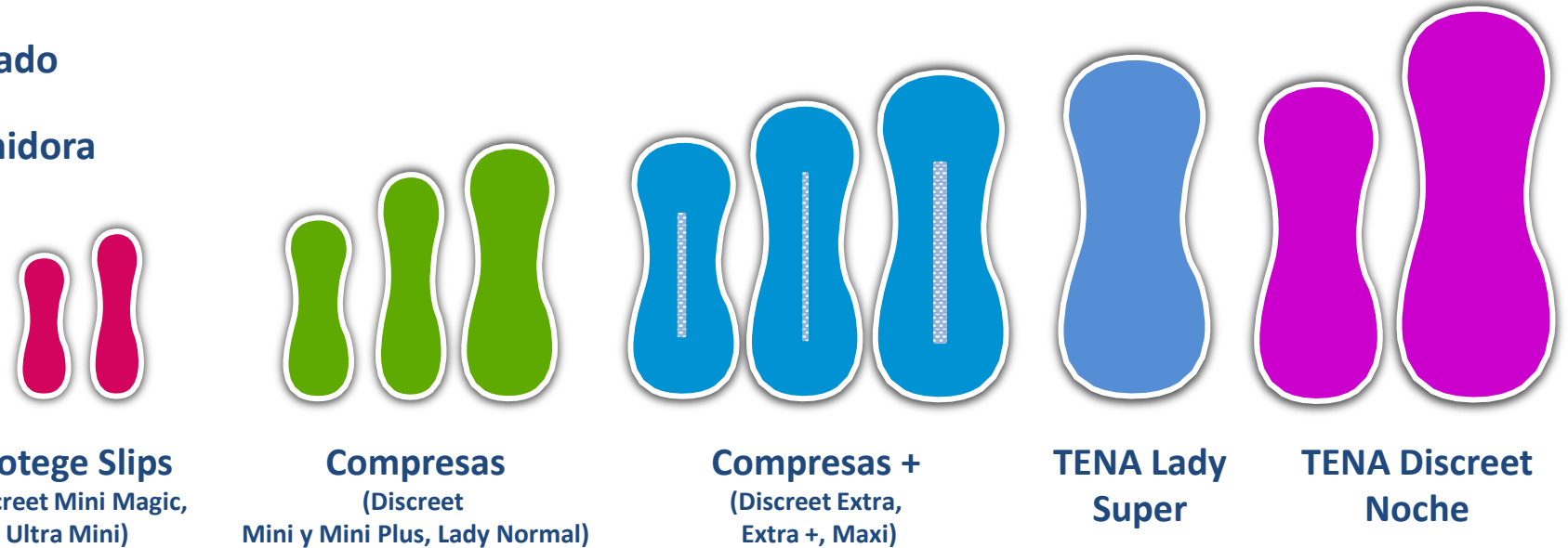

Mujeres +35 que **rechazan** su problema y usan productos de higiene femenina porque desconocen soluciones alternativas mejores para sus pérdidas de orina

**TENA Discreet** para pérdidas ocasionales o leves  
Mini Magic · Ultra Mini · Mini Ultra · Normal Ultra · Lady Normal · Normal Night

Mujeres +45 que **aceptan** usar productos específicos

**TENA Discreet** para pérdidas moderadas  
Extra · Extra Plus · Lady Super · Maxi · Maxi Night

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Discreet Protege Slip

### Beneficios de la gama TENA Discreet Protege Slip

#### Discreción

Un producto tan fino y discreto como las compresas femeninas.

#### Confort

Sentirse seca, fresca, y limpia todo el día.

#### Seguridad

Sentirse segura frente a las pérdidas de orina. Fresh Odour Control™ evita la aparición del olor.

#### Absorción\*

60-92 ml



Producto	Absorción	Un.	C.N.
Mini Magic	●●●●●●●●	34	302459
Ultra Mini	●●●●●●●●	28	170670

\*Capacidad de absorción total (método Rothwell)

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Discreet Compresas

### Beneficios de la gama TENA Discreet Compresas y Compresas +

#### Discreción

Forma anatómica / Forma de cuenco que se adapta perfectamente a la anatomía de la mujer.

#### Confort y Transpirabilidad

Suavidad, cuidado de la piel.  
Agradable sensación de sequedad.

#### Seguridad

Segura frente a las pérdidas de orina  
Fresh Odour Control™ evita los malos olores

#### Absorción\*

200 – 1.020 ml

Producto	Absorción	Un.	C.N.
Mini Ultra	●●●●●●●●	20	341909
Normal Ultra	●●●●●●●●	16	210873
Lady Normal	●●●●●●●●	12	343632
		24	216044



Producto	Absorción	Un.	C.N.
Extra	●●●●●●●●*	10	324913
		20	364687
Extra Plus	●●●●●●●●*	16	150204
Lady Super	●●●●●●●●*	30	160289
Maxi	●●●●●●●●*	12	354082



\*Capacidad de absorción total (método Rothwell)

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Discreet Noche

### Especialmente diseñada para el uso nocturno

- Parte posterior más ancha y más larga con un ajuste perfecto para la protección en posición tumbada
- Barreras elásticas laterales para mejorar la seguridad y mantenerse en su lugar

#### Discreción

Forma anatómica / Forma de cuenco que se adapta perfectamente a la anatomía de la mujer.

#### Confort y Transpirabilidad

Suavidad, cuidado de la piel.  
Agradable sensación de sequedad.

#### Seguridad

Segura frente a las pérdidas de orina  
Fresh Odour Control™ evita los malos olores

#### Absorción\*

600 – 1.020 ml



Producto	Absorción	Un.	C.N.
Normal Night	●●●●●●●●*	10	198940
Maxi Night	●●●●●●●●*	12	158779

\*Capacidad de absorción total (método Rothwell)

**ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)**

## **TENA Lights Sensitive**



# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Lights Sensitive

- ✓ Transpirable y respetuoso con pieles sensibles
- ✓ Capa superior enriquecida con una emulsión que ayuda a reducir la fricción
- ✓ Núcleo de absorción rápida
- ✓ Sin fragancias ni tintes en contacto con la piel
- ✓ Paquete fabricado con fibras renovables
- ✓ TRIPLE PROTECCIÓN. (3x Protection)

Producto	Absorción	Un.	C.N.
Long Liner	● ● ● ●	20	212212



Producto	Absorción	Un.	C.N.
Mini Ultra	● ● ● ● ● ● ● ●	20	212213

- **SEGURA:** Protección rápida y discreta
- **ODOUR CONTROL:** Micro-perlas activas que neutralizan el desarrollo del mal olor
- **SECA:** Gracias a su Zona de absorción

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Silhouette

- Para mujeres que sufren de incontinencia moderada, posiblemente en periodo de **post-menopausia**, y quieren sentirse más **femeninas**.
- Para mujeres que en ocasiones especiales necesitan **seguridad extra** y se sienten preocupadas con el **tamaño** de los pants tradicionales.
- Diseño muy **femenino** con una cintura más baja para una mayor **discreción**
- Con tacto y sensación más **semejante a la ropa interior normal**, para mujeres que buscan una solución más **discreta y femenina**.
- “Fresh Odour Control”, que inhibe el desarrollo de olores derivados del amonio



# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Silhouette

Discreto,  
seguro y  
confortable



Cintura ALTA  
y BAJA

Para mujeres activas, que disfrutan sus hobbies, viajar y  
tener vida social normal.

Color:  
Blanco, Negro,  
Crema

Control del  
desarrollo de los  
olores

Diseñado para a  
anatomía femenina con  
núcleo fino y ajustado

Materiales  
cómodos,  
transpirables  
y suaves

Barreras  
anti-escapes  
dobles

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Silhouette

### CINTURA BAJA

#### TENA Silhouette Blanco

Talla	Un.	C.N.
M	12	162372
G	10	162373



### CINTURA ALTA

#### TENA Silhouette Crema

Talla	Un.	C.N.
M	9	187307
G	8	187308



#### TENA Silhouette Negro

Talla	Un.	C.N.
M	12	194280
G	10	194281



#### TENA Silhouette Negro


Talla	Un.	C.N.
M	9	194283
G	8	194284



4

## ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

# Incontinencia masculina

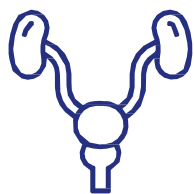

La causa más frecuente son los **PROBLEMAS DE PRÓSTATA Y SUS TRATAMIENTOS**

### CAUSAS de la incontinencia masculina



También puede aparecer como consecuencia de:



**OBESIDAD**



**ESTREÑIMIENTO**



**INFECCIONES**



**EFFECTOS SECUNDARIOS  
DE ALGUNOS  
MEDICAMENTOS**

4

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC) TENA Men y TENA Men Pants

Línea de productos TENA diseñada exclusivamente para hombres

## MEN



## MEN Pants



Discretos, seguros y transpirables

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Men Washable

### Usar, lavar y reutilizar

- Diseño ergonómico con zona de absorción invisible
- Cómodo y elástico
- Certificado OEKO-TEX. Calidad superior a prueba de sustancias nocivas.
- Diseñado para pérdidas leves



Talla	Cintura (cm)	C.N.
S	84-89	214363
M	90-95	214364
L	96-101	214365

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Men Escudo Protector



Exclusivo diseño en **negro\***

Dermatológicamente testado

**TRANSPIRABLE**

**Extra-fino (3mm)**

se adapta a la ropa interior con  
comodidad y discreción

**Odour control**

Forma redondeada



**1 de cada 4 hombres de +40  
años presenta pérdidas de orina**

**Absorbente Extra-light** para la  
seguridad contra el goteo leve y  
de urgencia

**Envasados individualmente**  
para un transporte discreto

*\* 3000 hombres de diferentes países prefirieron el color negro (más masculino y diferencia de las compresas femeninas)*

**essity**  
*formación*

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Men Level 1, 2 y 3


Tamaño adecuado para cada absorción

Área de absorción reforzada

Inguinales elásticos más cortos

**TRANSPIRABLE**

Forma redondeada

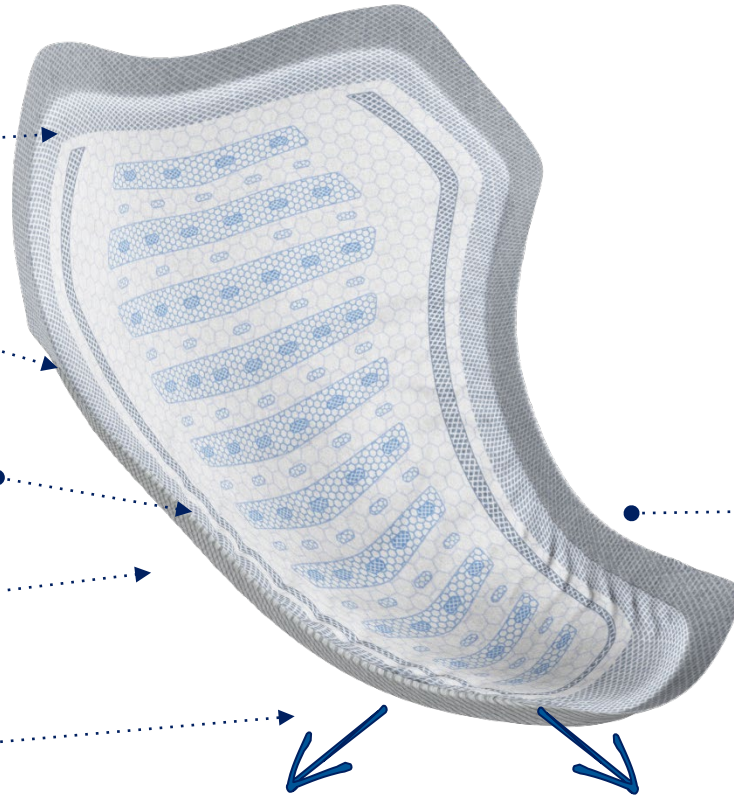

Más finos

Forma de cuenco

### Causas de la Incontinencia Masculina

La causa más frecuente de la incontinencia urinaria masculina son los problemas de **próstata** y sus tratamientos.

También puede aparecer como consecuencia de la **obesidad**, **estreñimiento**, **infecciones** o por efectos secundarios de algunos **medicamentos**.



# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Men Level 1, 2 y 3

TENA Men está disponible en cuatro niveles de absorción según la protección específica que se necesite.



TENA Men	Escudo Protector	Level 1	Level 2	Level 3
Código Nacional	179073.6	266049.6	266114.1	158780.0
Absorción Rothwell	140 ml	275 ml	450 ml	710 ml
Medida	18 cm	23 cm	27 cm	27 cm
				

4

## ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

# TENA Men Pants – Ropa interior desechable

# MEN Pants



Parte trasera  
señalada y corte  
cómodo tipo  
“boxer”



Para hombres activos, que disfrutan del deporte, viajan y tienen vida social normal.

2 colores, 2 diseños, 2  
niveles de absorción y 2  
tallas (M & L)

Control del  
desarrollo de los  
olores

Diseñado para  
a anatomía  
masculina

Materiales  
cómodos,  
transpirables  
y suaves

4

## ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

### TENA Men Pants – Ropa interior desechable

#### MEN Pants


#### Active Fit

	Talla M	Talla L
Código Nacional	187309.5	187311.8
Absorción Rothwell (ml)	1010	1010
Talla	46-52	50-56



#### Premium Fit

	Talla M	Talla L
Código Nacional	184535.1	162376.8
Absorción Rothwell (ml)	1430	1430
Talla	46-52	50-56

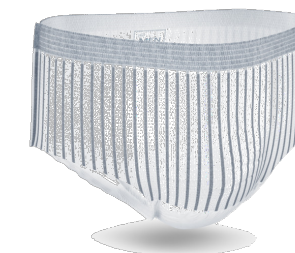

4

## ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

### TENA Pants Unisex



#### TENA Pants Maxi

Nivel de absorción superior al supernoche (financiado)

**MAYOR ABSORCIÓN DEL MERCADO**



Cómodos, seguros y transpirables

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Pants Unisex

100% transpirable  
en todo el producto

### Exclusiva Dual Absorption Zone:

- Doble cámara de absorción para un óptima protección y sequedad
- Forma de núcleo más confortable

**Odour Neutraliser**  
Reduce el efecto del amoníaco (olor)

**Integrada**  
Para una seguridad adicional



### TENA Pants Plus / Super / Maxi\*

- Para **mujeres y hombres**
- Para **niños** con enuresis
- Para personas socialmente **activas**
- Para personas con **independencia** o cierta ayuda
- Para personas que tienen un nivel de incontinencia de **moderadas a grave**



\*TENA Pants Maxi: Absorción Superior a supernoche (único en el mercado)

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)

## TENA Pants Unisex

### TENA Pants Plus

Talla	Absorción	Un.	C.N.
P	●●●●●●●●	14	391607
M	●●●●●●●●	14	392282
G	●●●●●●●●	14	302273



### TENA Pants Maxi

Talla	Absorción	Un.	C.N.
M	●●●●●●●●	10	158777
G	●●●●●●●●	10	158778



### TENA Pants Super

Talla	Absorción	Un.	C.N.
M	●●●●●●●●	12	181375
G	●●●●●●●●	12	181376



4

## **ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)** **TENA Gama Higiene (con y sin agua)**

Dedicados al cuidado de la piel de las personas con incontinencia urinaria



Sin agua



Con agua

4

# **ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC)** **TENA Gama Higiene (con y sin agua)**

**TENA ProSkin Toallitas Húmedas. Sin plástico**  
(TENA ProSkin Wet Wipes. Plastic-free)

Un.	C.N.
48	208679



**TENA ProSkin Toallitas Secas**  
(TENA ProSkin Soft Wipes)

Un.	C.N.
135	168028



**TENA ProSkin Crema Limpiadora 3 en 1**  
(TENA ProSkin Wash Cream)

mL.	C.N.
1.000	168714



**TENA ProSkin Manoplas Húmedas**  
(TENA ProSkin Wet Wash Gloves)

Un.	C.N.
8	176319



**TENA ProSkin Gel-Champú**  
(TENA ProSkin Shampoo & Shower)

mL.	C.N.
500	168713



**TENA ProSkin Loción Hidratante**  
(TENA ProSkin Body Lotion)

mL.	C.N.
500	168712



**TENA ProSkin Gorro Champú**  
(TENA ProSkin Shampoo Cap)

Un.	C.N.
1	176325



4

# ABSORBENTES DE VENTA LIBRE (OTC) TENA Productos Complementarios

### TENA Empapadores (TENA Bed)

Producto	Tamaño	Un.	C.N.
TENA Bed Plus	60 x 90cm	35	175045
TENA Bed Plus con alas	80 x 180cm	20	354125
TENA Bed Super	60 x 90cm	35	175044




### TENA Baberos (TENA Bibs)

Producto	Tamaño	Un.	C.N.
TENA Bibs M	37 x 46cm	150	168454
TENA Bibs L	37 x 66cm	150	168455



# Composición de un absorbente

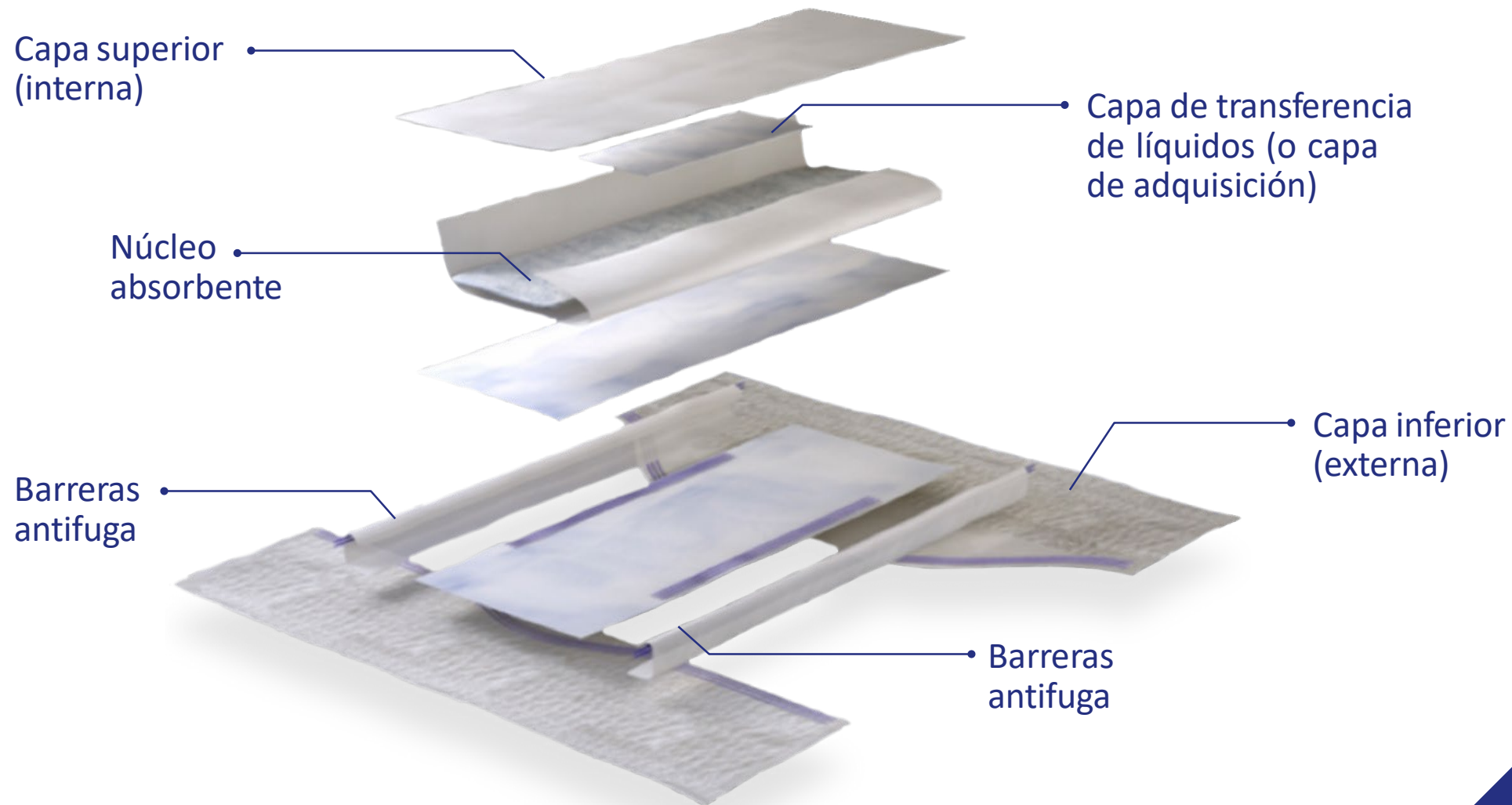

## 4 Barreras Antifugas. Seguridad frente a fugas





TENA ProSkin Elástico



TENA Flex ProSkin



ORLYS ProTaction Pants

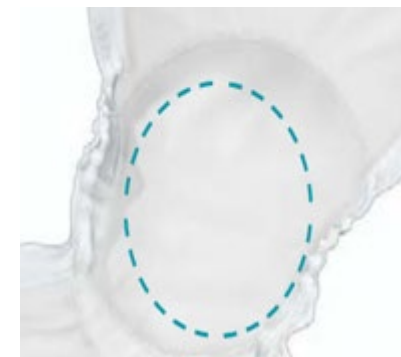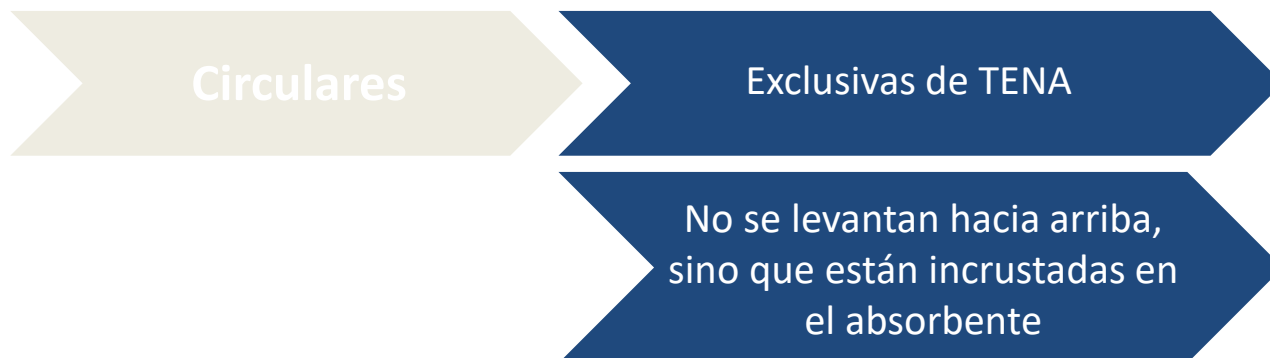


TENA Anatómico Comfort

## 5 Capa inferior o externa

- La capa externa del producto debe ser impermeable. En algunos productos además es totalmente **transpirable**, lo que permite preservar la salud de la piel del paciente.
- Tanto en **TENA ProSkin Elástico** como en **TENA Flex ProSkin (Anatómico con Cinturón)** y **ORLYS ProTection Pants**, el indicador de humedad se encuentra longitudinalmente, a lo largo del absorbente.
- En el caso de **TENA Anatómico Comfort**, el indicador de humedad se encuentra en forma de dos líneas, una en la parte delantera y otra en la parte posterior.

En la capa externa del producto debe existir un indicador de humedad. Este indicador de humedad cambiará de color, cuando entre en contacto con la orina, indicando así el momento adecuado del cambio

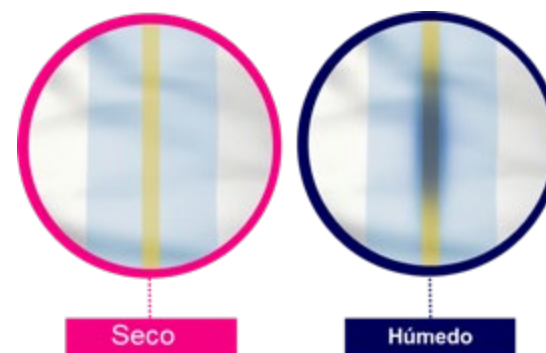

# Ajuste y sistemas de sujeción

Con adhesivos reposicionables  
(TENA ProSkin Elástico)




Con Cinturón (TENA Flex ProSkin)



Con malla de sujeción (TENA Anatómico Comfort y Rectangular)



Con elásticos en la cintura (ORLYS ProTection Pants)

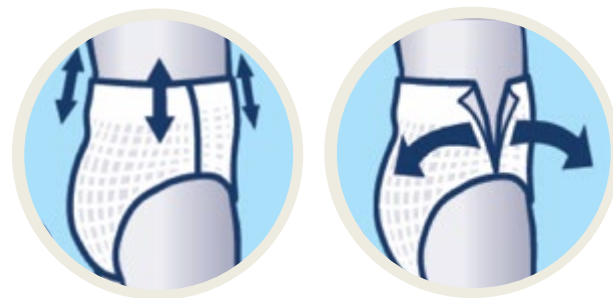

3

## ABSORBENTES REEMBOLSABLES



La nueva generación de absorbentes financiados respetuosa con la piel y el medio ambiente



**TOTAL  
TRANSPIRABILIDAD**



**FeelDry™  
ADVANCED**

**MAYOR  
VELOCIDAD DE  
ABSORCIÓN Y  
RETENCIÓN DE  
LA HUMEDAD**



**TRIPLE  
PROTECCIÓN  
ANTE PÉRDIDAS,  
OLORES Y  
HUMEDAD**



**AVALADA POR  
EXPERTOS  
EXTERNOS DE  
LA SKIN HEALTH  
ALLIANCE**



**APUESTA  
POR CUIDAR  
DEL MEDIO  
AMBIENTE**

# ¿Qué es la Skin Health Alliance?

Essity Internal

3

# ABSORBENTES REEMBOLSABLES

## TENA Anatómico Comfort



### Forma anatómica

para una mayor comodidad y seguridad contra derrames

### Capa de adquisición rápida

para una mayor velocidad de absorción y mejor retención. Mantiene la piel seca más tiempo



Debe ajustarse con una **mallla de sujeción**

Recomendado para todo tipo de pacientes (excepto pacientes con demencias)

3

# ABSORBENTES REEMBOLSABLES

## TENA Flex ProSkin<sup>®</sup> (Anatómico Cinturón)




Producto con cinturón y tecnología FeelDry™ Advanced totalmente transpirable, ergonómico, agradable y fácil de cambiar proporcionando al mismo tiempo un ajuste cómodo y seguro

### Único con cinturón y velcro

Especialmente diseñado para facilitar su colocación. Tanto por parte del paciente como del cuidador. El cinturón se abrocha hacia delante, ajustándose a las necesidades de cada persona


### FeelDry™ Advanced

capa de tranferencia de líquidos para una rápida absorción que ayuda a mantener al paciente con mayor sensación de sequedad y durante más tiempo, proporcionándole mayor confort

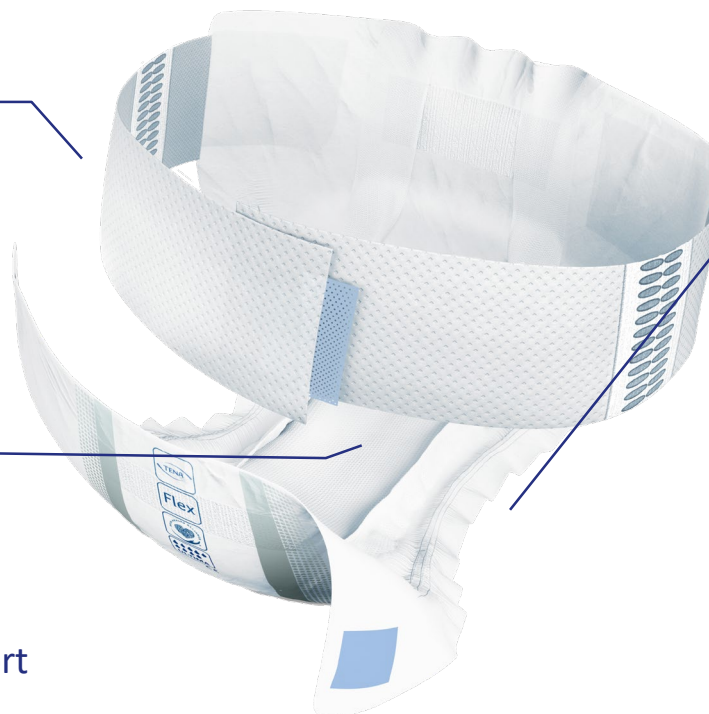

### Corte anatómico de la pernera (Body Fitting):

facilita la colocación, adaptándose perfectamente a la anatomía del paciente. Incorporan tres hilos de elastano, diseñados en forma de curva en toda la pernera

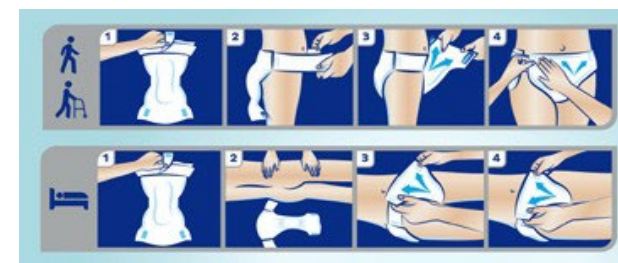

3

# ABSORBENTES REEMBOLSABLES

## TENA ProSkin Elástico



Producto todo en uno con tecnología FeelDry™ Advanced de rápida absorción para mantener la piel seca



### Banda elástica lumbar

Una amplia banda de suave y resistente film elástico, debidamente ubicada en la zona lumbar, ayuda a colocarse el producto y aumenta la seguridad frente a las pérdidas

### Bandas adhesivas

**extra anchas** para un ajuste perfecto, protección y máxima comodidad.



### Cierre central reutilizable

(Adhesivos reposicionables **EasyFix**): 4 adhesivos tipo velcro que permiten ser reposicionados múltiples

### Núcleo de rápida absorción

que proporciona seguridad elevada contra fugas. Ayuda a mantener al paciente con mayor sensación de sequedad y durante más tiempo proporcionándole mayor confort.

3

# ABSORBENTES REEMBOLSABLES ORLYS ProTection Pants



Ropa interior desechable con canales en el núcleo que proporcionan una rápida absorción, una mejor distribución del líquido y optimización del núcleo.



✓ Transpirable



✓ Absorción rápida



✓ Neutralizador de olores



✓ Ajuste ceñido al cuerpo



✓ Barreras antifugas seguras

✓ **3x PROTECCIÓN** : con Triple Protección segura, confortable y neutralizadora de olores



✓ Dermatológicamente testado

1. Registro de datos. Informe de prueba de preferencias 16938. Noviembre de 2016, Suecia / Reino Unido / Estados Unidos n = 84. Informe de prueba de preferencia TENA Pants Plus, junio de 2018, Polonia / Alemania n = 213. Informe de prueba de preferencia TENA Pants Normal. Noviembre de 2016, Polonia n = 104.

3

# ABSORBENTES REEMBOLSABLES ORLYS ProTecton Pants



Ropa interior desechable con canales en el núcleo que proporcionan una rápida absorción, una mejor distribución del líquido y optimización del núcleo.



✓ Transpirable



✓ Absorción rápida



✓ Neutralizador de olores



✓ Ajuste ceñido al cuerpo



✓ Barreras antifugas seguras

✓ **3x PROTECCIÓN** : con Triple Protección segura, confortable y neutralizadora de olores



✓ Dermatológicamente testado

1. Registro de datos. Informe de prueba de preferencias 16938. Noviembre de 2016, Suecia / Reino Unido / Estados Unidos n = 84. Informe de prueba de preferencia TENA Pants Plus, junio de 2018, Polonia / Alemania n = 213. Informe de prueba de preferencia TENA Pants Normal. Noviembre de 2016, Polonia n = 104.

3


ABSORBENTES REEMBOLSABLES

## ORLYS ProTection Pants- ¿En qué se diferencia ORLYS ProTection Pants?



### **NUEVO** ORLYS PROTECTION PANTS DÍA


Mejor absorción en comparación con  
los actuales ORLYS ProSkin Pants Día

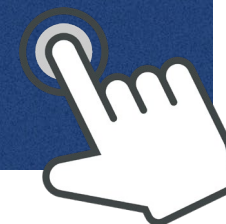

# 10 pasos para la correcta colocación y aprovechamiento de un absorbente

1

Elegir la talla adecuada a la **complexión física** del paciente para evitar derrames o cizallamiento.

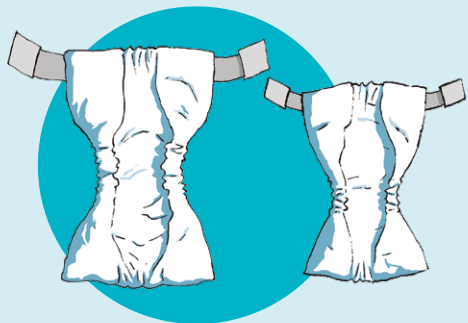


2

Potenciar la forma de cuenco doblando longitudinalmente el absorbente.



3

Ajustar el absorbente a la **ingle** ajustando las barreras antifugas.

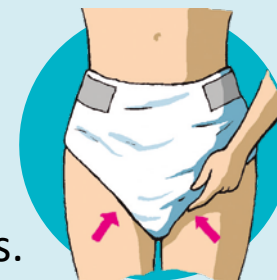


4

Evitar sacudir el absorbente antes de colocarlo para mantener su forma anatómica y favorecer el ajuste en la **ingle**.



5

No utilizar dos absorbentes a la vez, aumenta el riesgo de derrames y favorece el deterioro de la piel.

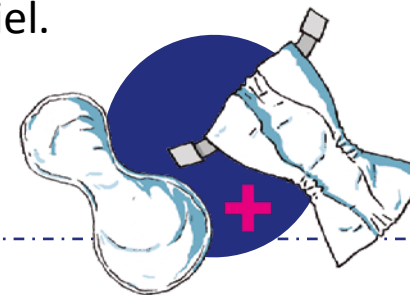

3

## ABSORBENTES REEMBOLSABLES

# 10 pasos para la correcta colocación y aprovechamiento de un absorbente

6

Revisar el indicador de humedad para no infrautilizar el absorbente.



7

Retirar el absorbente de delante hacia atrás (parte más limpia a más sucia) para evitar infecciones.



8

Evitar la aplicación de sustancias adicionales, disminuye la capacidad de absorción.



9

Evitar la perforación del absorbente; puede provocar irritaciones.



10

Seguir las instrucciones de colocación.  
Consúltalas aquí





Gracias

